


Dräger DrugCheck® 3000

Dispositif de dépistage de drogues

Utilisez le test de dépistage Dräger DrugCheck® 3000 pour déterminer en quelques minutes si une personne a récemment consommé certaines drogues. Ce test de drogue compact et rapide, par prélèvement de fluide buccal, offre des résultats fiables tout en étant abordable et facile à utiliser. Ne nécessitant aucune alimentation électrique, ce dispositif non invasif peut s'utiliser n'importe où.

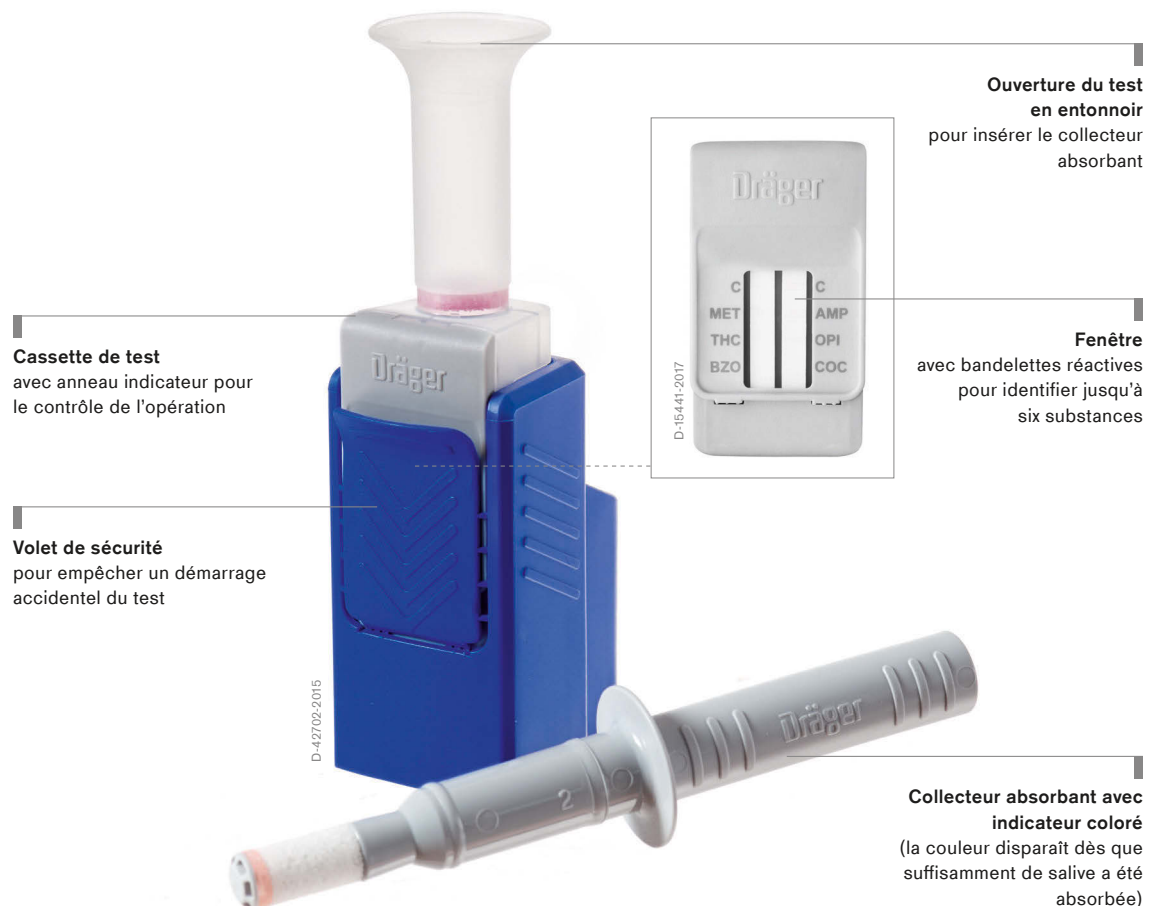

Avantages

Test de drogue permettant d'obtenir des échantillons facilement et en toute sécurité

Le dispositif de dépistage de drogues Dräger DrugCheck® 3000 se compose de deux éléments : un collecteur absorbant permettant de prélever un échantillon de salive et une cassette de test pour l'analyse. La cassette de test comporte le liquide tampon et une fenêtre de lecture avec deux bandelettes réactives, qui affichent les lignes de contrôle et de test. Le test s'effectue en trois étapes simples : prélever l'échantillon de salive, agiter le kit de test, attendre brièvement l'incubation, puis démarrer le test. L'indicateur coloré sur l'écouvillon disparaît aussitôt qu'assez de fluide oral a été absorbé.

Dès que les lignes de contrôle apparaissent dans la fenêtre, on peut consulter les résultats. Si le résultat du test est négatif, une ligne apparaîtra à côté de la catégorie de substance (drogue) correspondante. Cela signifie qu'aucune des substances cibles n'a été détectée dans l'échantillon. Si aucune ligne ne s'affiche à côté d'une catégorie de substance, alors le résultat pour cette substance est positif.

Analyse de drogue sensible et rapide

Avec le Dräger DrugCheck 3000, un seul et même test permet de détecter jusqu'à six substances simultanément : cocaïne, opiacés, amphétamines, méthamphétamines/drogues de synthèse (ecstasy, MDMA, etc.), benzodiazépines (par ex. dans les médicaments sur ordonnance) et cannabis (THC). Sur la liste des substances classées comme stupéfiants, le cannabis est la drogue la plus fréquemment consommée et dont les composants sont les plus difficiles à identifier (THC = delta-9-tetrahydrocannabinol). C'est pourquoi le Dräger DrugCheck 3000 a été spécialement optimisé pour détecter le THC. Il offre désormais deux options de mesure : en fonction de la durée d'attente choisie (pré-incubation) du test, il existe une option rapide avec un seuil de détection de THC élevé et une option plus sensible avec un seuil plus bas. Le test ne prend que trois à cinq minutes en tout.

Dépistage de drogue sans ambiguïté sur site

Compact et tenant dans la poche, le DrugCheck 3000 est facile à transporter. Facilement et rapidement prêt à l'emploi, il offre une grande souplesse d'utilisation dans diverses circonstances, notamment lors des contrôles routiers et pour les tests de sécurité sur les lieux de travail*. Exempt de toute pièce électrique, le kit de test est sans danger dans les zones à risque et même pour les analyses hors laboratoire.

Avantages complémentaires

Dräger possède des décennies d'expérience dans le développement d'équipement de mesure de l'alcoolémie et dans les méthodes de détection des drogues. Pour son DrugCheck 3000, Dräger a employé le principe de test éprouvé de son appareil de détection DrugTest® 5000, qui permet de déceler même des traces infimes de THC. À usage unique, le DrugCheck 3000 est hygiénique et empêche toute falsification.

*Aux États-Unis, le DrugCheck 3000 est vendu uniquement aux forces de l'ordre.

Produits associés

D-54720-2012



Dräger DrugTest® 5000

Plus de pipettes, pas de préparation, plus de manipulation, pas d'attente : Avec le Dräger DrugTest® 5000 non seulement le prélèvement est facile et rapide, mais en plus, son évaluation se fait automatiquement et immédiatement pour un résultat fiable, sur site.

D-6296-2009



SSK 5000 Dräger

Le SSK 5000 Dräger est utilisé pour le prélèvement de drogues sur ou à partir de surfaces. Lorsqu'il est utilisé en association avec le DrugTest® 5000 Dräger, l'échantillon est transféré vers une cassette de test afin de dépister une contamination éventuelle de cette surface par des drogues. L'échantillon prélevé peut être stocké et transporté pour des tests supplémentaires.

ST-13226-2007



DCD 5000 Dräger

Conservation fiable des pièces à conviction : Le DCD5000 Dräger permet de collecter, conserver et transporter environ 0,4 ml de salive. La variation de volume de l'échantillonneur reste minimale. Grâce à des taux de récupération reproductibles, il est possible de tirer des conclusions semi-quantitatives sur les classes de substance à analyser présentes dans l'échantillon au moment du prélèvement.

D-4347-2014



Dräger SCK

Pour suivre la chaîne de contrôles, veuillez utiliser le kit de confirmation avec le collecteur de fluide oral pour les prélèvements suivants en vue de l'analyse en laboratoire d'un échantillon, fourniture d'envoi inclus.

Caractéristiques techniques

Test de dépistage de drogues dans le fluide oral

Dimensions (l x h x p)	32 x 111 x 57 mm
Poids	< 30 g
Plage d'utilisation	Fonctionnement : de 5 °C à 40 °C, avec humidité relative de 5 à 95 %
Stockage/Transport	de 4 °C à 25 °C
Temps de mesure	Mesure rapide : analyse < 3 minutes Mesure sensible : analyse < 5 minutes
Sélection du mode de mesure	En fonction de la durée de pré-incubation sélectionnée et du seuil de détection du THC souhaité, pour une lecture rapide ou plus sensible
Homologations	Produit autorisé comme dispositif médical dans l'Union européenne conformément à la Directive 98/79/EC relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DIV). En dehors de l'Union européenne, produit destiné à une utilisation non médicale (non DIV) ou à une utilisation médico-légale (uniquement aux États-Unis).

Pour vos commandes

Dräger DrugCheck® 3000	Description	Réf.
Test de dépistage de drogues dans le fluide oral		
Dräger DrugCheck® 3000 STK 5 DIV	Unité de conditionnement de 20 kits	83 25 500
Dräger DrugCheck® 3000 STK 5 non DIV	Unité de conditionnement de 20 kits	83 25 580
Le Dräger DrugCheck® 3000 STK 5 détecte les substances suivantes :		
– Cocaïne (COC) – Opiacés (OPI) – Cannabis (THC) – Amphétamines (AMP) – Méthamphétamines (MET)		
Dräger DrugCheck® 3000 STK 6 DIV	Unité de conditionnement de 20 kits	83 27 950
Dräger DrugCheck® 3000 STK 6 non DIV	Unité de conditionnement de 20 kits	83 27 960
Le Dräger DrugCheck® 3000 STK 6 détecte les substances suivantes :		
– Cocaïne (COC) – Opiacés (OPI) – Cannabis (THC) – Amphétamines (AMP) – Méthamphétamines (MET) – Benzodiazépines (BZO)		

Notes

Notes

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion de la présentation. Pour davantage d'informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

SIÈGE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

FRANCE

Dräger Safety France SAS
3c, route de la Fédération
BP 80141
67025 Strasbourg
Tél +33 (0)3 88 40 76 76
Fax +33 (0)3 88 40 76 67
safety.france@draeger.com

SUISSE

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

BELGIQUE

Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Emirats Arabes Unis
Tél +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact

